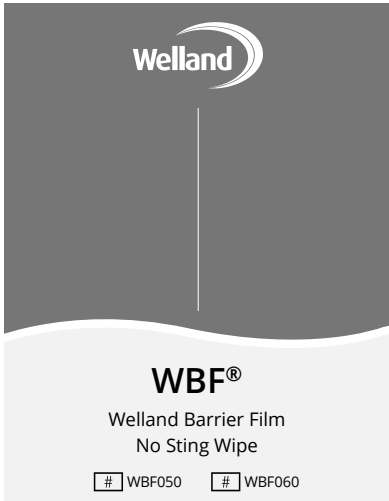


Welland Medical Ltd.,
Hydehurst Lane, Crawley,
West Sussex, RH10 9AS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1293 615455
www.wellandmedical.com

Welland® and the Welland logo™ are
trade marks of ClinMed (Holdings) Ltd.
PPR-INS-WF5-ROW 13 • PID 4863
16/10/2024

DA

Til stomiopererede

Ikke-sviende WBF®-servietter: Beskytter den peristomale hud mod kontakt med stomiåbningen og hudstripping forårsaget af stomiklæbere.

Forsigtig: Må kun anvendes på intakt peristomal hud. Må kun bruges som foreskrevet. Undgå brug på sarte eller følsomme områder af huden. Ved tvivlsspørgsmål kan der foretages en lappetest på et lille område før brug. Afbryd bruget, hvis der opstår irritation. Genanvendelse af en engangsanordning kan kompromittere sikkerhed og præstation. Dette produkt kan være uegnet til spædbarn, som er under 30 dage gamle. Må ikke indåndes. Anvendes i godt ventilerede områder. Anvendes straks efter åbning af posen.



Fare

Yderst brandfarlig væske og damp.

Det er vigtigt at bevare en sund peristomal hud for at forebygge komplikationer, når man lever med en stomi. Kontroller og vedligehold regelmæssigt huden omkring din stomi, og sammenlign den med huden på resten af din mave. Hvis du bemærker tegn på peristomale hudkomplikationer som f.eks. farveændring, irritation eller ændringer i tekstur, er det vigtigt straks at konsultere en sundhedsperson. Ubehandlede komplikationer kan have alvorlige konsekvenser og potentielt føre til systemiske helbredsproblemer. Proaktiv peristomal hudpleje og tidlig indgriben er dit bedste forsvor mod komplikationer og forbedrer dit generelle velbefindende betydeligt.

I tilfælde af et alvorligt uheld skal der straks søges lægehjælp, før producenten, Welland Medical Ltd., og de lokale kompetente myndigheder kontaktes via distributøren eller importøren.

RO

Pentru pacienții stomiziști

Servietele WBF® fără usturniri: Protejează pielea împotriva contactului cu materialele eliminante prin stomi și a descumării aferente îndepărtării adezivului stomiei.

Atenție: A se utiliza doar pe tegumentul peristomal intact. A se utiliza doar conform instrucțiunilor. A se evita utilizarea pe zonele delicate sau sensibile ale pielii. Înainte de prima utilizare, testați produsul pe o porțiune mică a pielii. În caz de iritație, se întrerupe utilizarea! Reutilizarea oricărei dispozitive de unică folosință poate compromite siguranța și performanța. A se utiliza cu precauție la bebeluși cu vârstă mai mică de 30 de zile. A nu se inhala. A se utiliza în zone bine ventilate. A se utiliza imediat după deschidere.




Pericol

Lichid și vapori foarte inflamabili.


Mentinerrea sănătății tegumentului peristomal este foarte importantă pentru a preveni apariția complicațiilor. Verificați periodic și mențineți sănătatea tegumentului din jurul stomiei comparându-l cu aspectul tegumentului sănătos al abdomenului. Dacă observați semne de complicații la nivelul tegumentului peristomal, cum ar fi modificarea culorii, iritația sau modificarea texturii, este esențial să consultați imediat un specialist din domeniul medical. Complicațiile netratate pot avea consecințe grave, care pot duce la probleme de sănătate sistemică. Îngrijirea proactivă a pielii peristomale și intervenția timpurie reprezintă cea mai bună metodă de prevenire a complicațiilor, îmbunătățind semnificativ starea de bine.

În cazul unui incident grav, solicitați asistență medicală înainte de a contacta fabricantul, Welland Medical Ltd., și autoritatea competentă locală prin intermediul distribuitorului sau al importatorului.

1

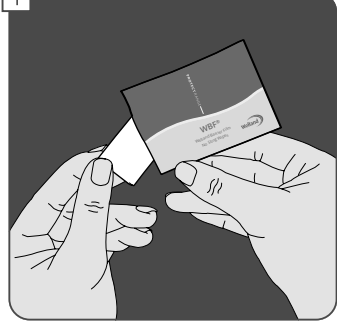

3

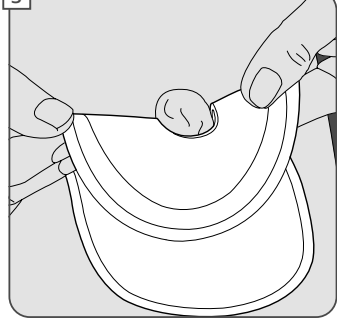

EU



CS Lifesciences Europe Limited
The Black Church
St. Mary's Place
Dublin 7
Dublin
D07P4X
Ireland

NO

Stomiopererte

No Sting WBF® våtservietter: Til beskyttelse av huden mot urin eller avføring samt stripping av huden.

Forsiktig: Må brukes på hel hud rundt stomien. Må bare brukes som anviset. Unngå ømfintlige eller sensitive hudområder. Hvis du er i tvil, kan du teste et lite område med en lapp før bruk. Avslutt bruken hvis det oppstår irritasjon. Gjenbruk av enheter for engangsbruk kan skade sikkerheten og ytelesen. Dette produktet er kanskje ikke egnet for bruk på babyer som er under 30 dager gamle. Må ikke inhaleres. Brukes i godt ventilete områder. Brukes umiddelbart etter åpning av posen.



Forsiktighetsregler

Yderst brandfarlig væske og damp.

Det er viktig å bevare en sund peristomal hud for at forebygge komplikasjoner, når man lever med en stomi. Kontroller og vedligehold regelmæssigt huden omkring din stomi, og sammenlign den med huden på resten af din mave. Hvis du bemærker tegn på peristomale hudkomplikationer som f.eks. farveændring, irritation eller ændringer i tekstur, er det vigtigt straks at konsultere en sundhedsperson. Ubehandlede komplikationer kan have alvorlige konsekvenser og potentielt føre til systemiske helbredsproblemer. Proaktiv peristomal hudpleje og tidlig indgriben er dit bedste forsvor mod komplikationer og forbedrer dit generelle velbefindende betydeligt.

I tilfælde af et alvorligt uheld skal der straks søges lægehjælp, før producenten, Welland Medical Ltd., og de lokale kompetente myndigheder kontaktes via distributøren eller importøren.

PT

Pessoa portadora de uma ostomia

Toalietes WBF® sem irritação: para proteger a pele periestomal saudável para prevenir a ocorrência de complicações quando se vive com uma ostomia. Verificar regularmente e manter a pele saudável à volta do estoma comparando-a com a pele no resto do abdômen. Se forem detetados sinais de complicações na pele periestomal, tais como alterações de cor, irritação ou alterações de textura, é essencial consultar imediatamente um profissional de saúde. As complicações que não forem tratadas podem ter consequências graves, levando potencialmente a problemas de saúde sistémica. A manutenção de cuidados proativos com a pele periestomal e a intervenção precoce são a melhor defesa contra a ocorrência de complicações, o que melhora significativamente o bem-estar geral.

Cuidados: Para utilização apenas em pele periestomal intacta. Utilizar apenas conforme indicado. Evitar áreas com pele delicada ou sensível. Em caso de dúvida, realizar um teste epicutâneo numa pequena área antes de utilizar. Interromper a utilização caso se verifiquem irritações. A reutilização de qualquer dispositivo de utilização única pode comprometer a segurança e o desempenho. Este produto pode não ser adequado para utilização em bebés com idade inferior a 30 dias. Não inalar. Utilizar em locais bem ventilados. Usar imediatamente após a abertura da saceta.




Perigo

Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

É fundamental manter a pele periestomal saudável para prevenir a ocorrência de complicações quando se vive com uma ostomia. Verificar regularmente e manter a pele saudável à volta do estoma comparando-a com a pele no resto do abdômen. Se forem detetados sinais de complicações na pele periestomal, tais como alterações de cor, irritação ou alterações de textura, é essencial consultar imediatamente um profissional de saúde. As complicações que não forem tratadas podem ter consequências graves, levando potencialmente a problemas de saúde sistémica. A manutenção de cuidados proativos com a pele periestomal e a intervenção precoce são a melhor defesa contra a ocorrência de complicações, o que melhora significativamente o bem-estar geral.

No caso de um incidente grave, procurar aconselhamento médico antes de contactar o fabricante, a Welland Medical Ltd., e a Autoridade Competente local através do respetivo distribuidor ou importador.

2

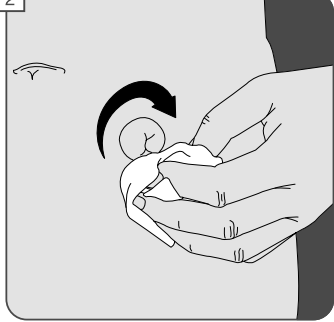

4



AU



Omignon Pty Ltd.
Suite 2, Level 2, 582 Swan Street
Burnley VIC 3121 Australia
Tel: AU 1800 819 274 /
NZ 0800 440 027

ES

Para ostomizados

Toallitas quitia-adesivo WBF®: protegen la piel periestomal del contacto de los desechos del estoma y de las tiras adhesivas.

Advertencia: Solo debe usarse sobre la piel periestomal intacta. Seguir las instrucciones de uso. Evitar zonas delicadas o sensibles de la piel. En caso de duda, haga una prueba en una pequeña parte de la piel antes de utilizarlo. Deje de utilizar el producto en caso de irritación. Volver a usar un dispositivo de un solo uso puede suponer un peligro para la seguridad y el rendimiento del mismo. Este producto puede no ser apto para bebés menores de 30 días. No inhalar. Utilizar en zonas bien ventiladas. Usar inmediatamente después de abrir el sobre.



Peligro

Líquido y vapor altamente inflamables.

Mantener la piel periestomal saludable es vital para prevenir complicaciones al vivir con una ostomía. Revisar y mantener regularmente la salud de la piel alrededor de su estoma, y compararla con la piel del resto del abdomen. Si nota algún signo de complicaciones en la piel periestomal, como cambios de color, irritación o cambios en la textura, es esencial consultar a un profesional de la salud de inmediato. Las complicaciones no tratadas pueden tener consecuencias graves, lo que podría llevar a problemas de salud sistémicos. El cuidado proactivo de la piel periestomal y la intervención temprana son la mejor defensa contra las complicaciones, pues mejora significativamente el bienestar general.

Se se produce un problema grave, busque asistencia médica antes de ponerse en contacto con el fabricante, Welland Medical Ltd., y la autoridad local competente a través de su distribuidor o importador.

PL

Dla osób żyjących ze stomią

Toaletki bez WBF®: Chronią skórę wokół stomii przed kontaktem z treścią stolijną i kłojem.

Uwaga: Używać tylko na nieuszkodzonej skórze. Używać wyłącznie zgodnie z zaleceniami. Unikać delikatnych lub wrażliwych obszarów skóry. W razie wątpliwości, przed użyciem należy przeprowadzić próbę na małej powierzchni skóry. W przypadku wystąpienia podrażnienia należy przerwać stosowanie. Ponowne wykorzystanie jakiegokolwiek urządzenia jednorazowego użytku wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa i ryzykiem nieprawidłowego działania. Ten produkt może nie być odpowiedni do stosowania u niemowląt poniżej 30. dnia życia. Nie wdychać. Używać w dobrze wentylowanych miejscach. Użyć natychmiast po otwarciu zaszeki.



Niebezpieczeństwo

Wysokie łatwopalna ciecz i opary.

Utrzymanie zdrowej skóry wokół stomii ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania powikłaniom podczas życia ze stomią. Należy regularnie sprawdzać i dbać o stan skóry wokół stomii, porównując ją ze skórą na pozostałej części brzucha. W przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak powikłań okołostomijnych, takich jak zmiana koloru, podrażnienie lub zmiana tekstury skóry, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Nielezione powikłania mogą mieć poważne konsekwencje, potencjalnie prowadząc do ogólnoustrojowych problemów zdrowotnych. Proaktywne pielęgnowanie skóry okołostomijnej i wczesna interwencja stanowią najlepszą ochronę przed powikłaniami, znacznie poprawiając ogólnie samopoczucie.

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu skontaktować się z lekarzem, a następnie z producentem, firmą Welland Medical Ltd., i właściwym organem lokalnym za pośrednictwem dystrybutora lub importera.

FI

Avanneleikatuille

No Sting WBF®-pyyhkeet: Suojaa avannetta ympäröivää ihoa avanteen eritteiltä ja avanneilman aiheuttamalta ihon kuorutumiselta.

Varoitus: Käytettävä vain avannetta ympäröivällä iholla. Käytettävä ohjeiden mukaisesti. Vältä käyttöä herkällä tai arolla ihoalueilla. Jos olet epävarma, testaa pienellä ihoalueella ennen käyttöä. Jos esiintyy ärsytystä, käytto on lopetettava. Kertakäyttöisen tuotteen uudelleenkäyttö heikentää sen turvallisuutta ja suorituskykyä. Tuote ei välttämättä sovellu alle 30 päivän ikäisille vauvoille. Älä hengitä tuotetta. Käytä hyvin ilmastoidussa tilassa. Käytä heti annospussin avamisen jälkeen.



Vaara

Helpossti syttyvä neste ja höyry.

Avannetta ympäröivän ihon ylläpitäminen terveenä on elintärkeää komplikaatioiden ehkäisemiseksi avanteen kanssa eläessä. Tarkista ja ylläpidä säännöllisesti avannetta ympäröivän ihon terveystä vertaamalla sitä muun vatsan ihon terveyteen. Jos havaitset merkkejä avannetta ympäröivän ihon komplikaatioista, kuten värimuutoksia, ärsytystä tai muita ihomuutoksia, on tärkeää käynnätyä viipymättä terveystuhoisuuden arvioinnin puoleen. Hoitamattomia komplikaatioita voi olla vakavia seurauksia, jotka voivat johtaa koko kehon terveysongelmiin. Avannetta ympäröivän ihon ennaltaehkäisävo hoido ja varhainen puuttuminen ovat paras suojä komplikaatioita vastaan, mikä parantaa merkittävästi yleistä hyvinvointia.

Kysy vakavassa tapauksessa lääkärin neuvoa, ennen kuin otat yhteyttä valmistajaan Welland Medical Ltd:in ja paikalliseen valvontaviranomaiseen kielijalan tai maahantuojan kautta.

LT

Žmonės po stomos operacijos

Ne dirginančios WBF® servetėlės: apsaugo peristomą odą nuo sąlyčio su stomos išmatomis ir su stomijos klajais susijusio odos pažeidimo.

Išspėjimas: naudoti tik ant nepažeistos peristomos odos. Naudoti tik pagal instrukciją. Vengti švelnių ar jautrių odos vietų. Jei kyla abejonių, prieš naudojimą išbandyti ant nedidelio odos ploto. Jei atsiranda dirginimas, nutraukti naudojimą. Bet kuro vienkartinio priedais pakartotinis naudojimas gali pakenkti jo saugumui ir veikimui. Sis produktas netinkamas naudoti kūdikiams iki 30 dienų. Neįkvėpti. Naudoti gerai vėdinamose patalpose. Naudokite iš karto atidarius pakuotę.



Pavojus

Labai degus skystis ir garai.

Norint išvengti komplikacijų nešiojant stomą, labai svarbu, kad peristominė oda būtų sveika. Reguliariai tikrinkite ir prižiūrėkite odos aplink stomą būklę, lygindami ją su kitos plauš dalies oda. Jei pastebėsite kokių nors peristominės odos komplikacijų požymių, pvz., pakičiusią spalvą, sudirginimą ar tekstūros pokyčius, nedelsdami kreipkitės sveikatos priežiūros specialistu. Nėgydomos komplikacijos gali turėti rimtų pasekmių ir sukelti sisteminių sveikatos problemų. Aktyvi peristomos odos priežiūra ir ankstyva intervencija – tai geriausia apsauga nuo komplikacijų, kuri žymiai pagerina bendrą savijautą.

Rimto įvykio atveju kreipkitės į gydytoją prieš susisiekdami su gamintoju, „Welland Medical Ltd.“ ir vietos kompetentinga institucija per savo platintoją ar importuotoją.

EN

For Ostomates

No Sting WBF® wipes: Protects peristomal skin from contact with stoma output and osomy adhesive related skin stripping.

Caution: For use on intact peristomal skin only. Use only as directed. Avoid delicate or sensitive areas of skin. In doubt, patch test a small area prior to use. Discontinue use if irritation occurs. Reuse of any single use device may compromise safety and performance. This product may not be suitable for use on babies under 30 days old. Do not inhale. Use in well-ventilated areas. Use immediately after opening sachet.



Danger

Highly flammable liquid and vapor.

Maintaining healthy peristomal skin is vital to prevent complications when living with a stoma. Regularly check and maintain the health of the skin around your stoma, comparing it with the skin on the rest of your abdomen. If you notice any signs of peristomal skin complications such as colour change, irritation, or changes in texture, it's essential to consult a healthcare professional promptly. Untreated complications can have serious consequences, potentially leading to systemic health problems. Proactive peristomal skin care and early intervention are your best defence against complications, significantly improving your overall well-being.

In the event of a serious incident, seek medical advice before contacting the manufacturer, Welland Medical Ltd., and your local Competent Authority via your distributor or importer.

BG

за стомираните пациенти

Неагресици WBF® кърпички: Предпазва кожата от контакт с отпадни продукти от стомата и отлепване на кожата заради лепило то на стомата.

Внимание: Да се използва само върху здрава перистомална кожа. Да се използва само съгласно указанията. Да се избягват зони с деликатна или чувствителна кожа. При съмнение преди употреба да се направи пач тест на малка зона. Употребата да се престане при поява на дразнене. Повторната употреба на всяко устройство за еднократна употреба може да компрометира безопасността и ефикасността му. Този продукт може да не е подходящ за използване при бебета на възраст под 30 дни. Да не се вдишва. Да се използва в помещения с добра вентилация. Да се използва веднага след отваряне на пакета.



Опасност

Силно запалими течности и пари.

Поддържането на здрава перистомална кожа е жизненоважно за предотвратяване на усложнения при живот със стома. Регулярно проверявайте и поддържайте здравето на кожата около стомата, сравнявайки с кожата на останалата част от корема. Ако забележите нежакви признаци на усложнения на перистомалната кожа, като например промяна на цвета, дразнене или промени в текстурата, е важно незабавно да се консултират с медицински специалисти. Нелекуваните усложнения могат да имат сериозни последици и да доведат до системи здравословни проблеми. Проактивната грижа за перистомалната кожа и ранната намеса са най-добрата защита срещу усложненията, като значително подобряват цялостното ви здраве.

В случай на сериозен инцидент потърсете медицинска помощ, преди да се свържете с произвождителя, Welland Medical Ltd., и компетентния местен орган чрез Вашия дистрибутор или вносителя.

FR

Pour stomisés

lingettes No Sting WBF®: protège la peau péristomale du contact avec les déchets de stomie et des irritations cutanées liées aux rubans adhésifs.

Attention : A n'utiliser que sur la peau péristomale intacte. N'utiliser qu'en suivant les instructions. Éviter les zones délicates ou sensibles de la peau. En cas de doute, effectuer un test de tolérance sur une petite zone avant utilisation. Cesser d'utiliser en cas de signes de irritation. La réutilisation individuelle d'un dispositif quelconque peut compromettre sa sécurité et ses performances. Ce produit peut ne pas convenir aux nourrissons de moins de 30 jours. Ne pas inhaler. Utiliser dans des endroits bien ventilés. Utiliser immédiatement après ouverture du sachet.



Danger

Liquide et vapeur hautement inflammables.

Le maintien d'une peau péristomale saine est essentiel pour prévenir les complications lorsque vous vivez avec une stomie. Vérifiez et veillez à garder la peau autour de la stomie propre et saine, la en comparant à la peau du reste de votre abdomen. Si vous remarquez des signes de complications cutanées péristomales, tels qu'un changement de couleur, une irritation ou une modification de la texture, il est essentiel de consulter rapidement un professionnel de santé. Les complications non traitées peuvent avoir des conséquences graves, voire entraîner des problèmes de santé systémiques. Des soins préventifs de la peau péristomale et une intervention précoce constituent votre meilleure défense contre les complications et améliorent considérablement votre bien-être général.

En cas d'incident sérieux, demander un avis médical avant de contacter le fabricant, Welland Medical Ltd., et votre autorité compétente locale par l'intermédiaire de votre distributeur ou importateur.

LV

Cilvēkiem ar stomu

Nekaidģas WBF® salvetes: aizsargā ādu ap stomu pret saskari ar stomas izvades materiālu un ostomijas klajiem, kas saistīti ar ādas lobīšanos.

Uzmanību! Lietot tikai uz neskarītas peristomālās ādas. Lietot tikai saskaņā ar norādījumiem. Izvairieties no lietšanas uz delikātām vai jutīgām ādas vietām. Ja rodas ādas apsāp, pirmās palīdzības veiciet nelielu plāksteru testu. Ja rodas kairinājums, pārtrauciet lietošanu. Šis produkts var nebūt piemērots lietošanai zīdaiņiem, kuri jaunāki par 30 dienām. Neieelpot. Lietot labi vēdināmā telpā.



Bīstamība

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Veelgais ādas ap stomu uzturēšana ir ļoti svarīga, lai novērstu komplikācijas stomas gadījumā. Regulāri pārbaudiet ādas veselību ap stomu, salīdzinot to ar ādu uz pārējās vēdera daļas, kā arī uzstiet veselību ādā ap stomu, ja pamanāt ādas ap stomu komplikāciju pazīmes, piemēram, krāsas izmaiņas, kairinājumu vai struktūras izmaiņas, ir svarīgi nekavējoties konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu. Nērtārstēti komplikācijām var būt nopietnas sekas, kas var izraisīt sistēmiskas veselības problēmas. Labāks veids, kā novērst komplikāciju veidošanos, ir proaktīvi rīkoties ar stomu. Proaktīvā peristomālās ādas aprūpe un agrīna intervencija ir jūsu vislabākā aizsardzība pret komplikācijām, kas ievērojami uzlabo jūsu vispārējo labklājību.

Nopietnā negadījumā apstāties vērsieties pēc ārstā palīdzības, iekams sazināties ar ražotāju Welland Medical Ltd., un jūsu vietējo atbildīgo iestādi ar izplatītāja vai importētāja starpniecību.

IT

Per persone stomizzate

Salviettine non irritanti WBF®: Protegge la cute peristomale dal contatto con gli effluenti dello stoma e con lo scollamento cutaneo dell'adesivo.

Avvertenza: utilizzare solo su cute peristomale non lesionata. Utilizzare solo come indicato. Evitare l'uso su aree cutanee delicate e sensibili. In caso di dubbio, testare un'area di piccole dimensioni prima dell'uso. Interrompere l'uso in presenza di irritazione. Il riutilizzo del dispositivo monouso può compromettere la sicurezza e le prestazioni. Questo prodotto potrebbe non essere idoneo per neonati di meno di 30 giorni. Non inalare. Utilizzare in aree ben ventilate. Usare subito dopo aver aperto la bustina.



Pericolo

Liquido e vapore altamente infiammabili.

Mantenere sana la cute peristomale è essenziale, al fine di evitare complicanze quando si vive con uno stoma. Controllare regolarmente e preservare la salute della cute intorno al proprio stoma, confrontandola con la pelle del resto dell'addome. Se si notano eventuali segni di complicanze della cute peristomale, ad es. cambiamenti di colore, irritazione o cambiamenti in termini di consistenza al tatto, è essenziale rivolgersi immediatamente a un operatore sanitario. Le complicanze non trattate possono comportare conseguenze gravi, causando potenzialmente problemi sistemici di salute. La cura proattiva della cute peristomale e un intervento tempestivo sono la miglior difesa contro complicanze, migliorando sensibilmente il proprio benessere complessivo.

In caso di inconveniente grave, consultare un medico prima di contattare il produttore, Welland Medical Ltd., e l'autorità locale competente tramite il proprio distributore o importatore.

SV

Avsedd för personer med stomi

No Sting WBF® våtservetter: Skyddar huden runt stomin från att komma i kontakt med stomiavfall och håtta.

Försiktighet: Endast för användning på intakt hud. Använd endast enligt anvisningarna. Undvik användning på känsliga hudområden. Vid osäkerhet, testa först på ett mindre område. Avbryt användningen om irritation uppstår. Återanvändning av engångsprodukter kan äventyra säkerhet och effektivitet. Produkten kan vara olämplig för spädbarn under 30 dagars ålder. Använd inandning. Använd i välventilerade utrymmen. Använd den styckförpackade våtservetten omedelbart efter att förpackningen har öppnats.



Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Att bibehålla frisk hud runt stomin är avgörande för att förebygga komplikationer när man lever med stomi. Kontrollera och värda området runt stomin regelbundet, jämför hudens utseende runt stomin med övrig hud på buken. Om du upptäcker tecken på komplikationer, som färgförändringar, irritation eller förändringar i hudens struktur, är det viktigt att kontakta sjukvårdspersonal. Obehandlede hudkomplikationer runt stomi kan leda till allvarigare och återkommande hälsoproblem. Genom att värda huden och agera tidigt mot tecken på besvär, kan du effektivt förebygga komplikationer och främja ditt allmänna välbefinnande.

Om en allvarig incident inträffar ska du kontakta vården innan du kontaktar tillverkaren, Welland Medical Ltd., och din lokala reglerande myndighet via din distributör eller importör.

CS

Pro stomiky

Stomická pomůcka příslušenství, Návod na použití.

Utorousky No Sting WBF®: Čtrání peristomální kůži před kontaktem s výstřelky ze stomy a před strháváním pokožky při použití lepidla stomického prostředku.

Upozornění: Pouze pro použití na neporušenou peristomální pokožku. Používejte pouze na zcela zdravou pokožku. Vyhýbejte se jemným nebo citlivým oblastem pokožky. Pokud si nejste jisti, před použitím nejprve vykoušejte na malé oblasti pokožky. V případě výskytu podráždění přestaňte prostředek používat. Opakované použití prostředku určeného k jednorázovému použití může ohrozit bezpečnost a funkci. Tento produkt nemusí být vhodný pro použití u novorozenců mladších 30 dní. Nevdechujte. Používejte v dobře větráraných prostorách. Používejte ihned po otevření sáčku.



Nebezpečí

Vysocce hořlavá kapalina a páry.

Udržovat zdravou peristomální pokožku je zásadní pro prevenci komplikací při životě se stomi. Pravidelně kontrolujte a udržujte stav pokožky v okolí stomie a porovnávejte ji s pokožkou na zbytku těla. Pokud si všimnete jakýchkoli příznaků peristomálních kožních komplikací, jako jsou změna barvy, podráždění nebo změny struktury pokožky, neprodávě se obraťte se zdravotníkem. Neléčené komplikace mohou mít závažné následky a vést k systémovým zdravotním problémům. Proaktivní péče o peristomální pokožku a včasný zásah jsou nejlepší obranou proti komplikacím a výrazně zlepšují váš celkový pohodu.

V případě závažného incidentu vyhledejte nejprve lékařskou pomoc předtím, než kontaktujete výrobce Welland Medical Ltd. a místní příslušný orgán pro střeďnictvím vašeho distributora nebo dovoze.

EL

Για άτομα με στομία

Μονηλικά που δεν προκαλούν τσίχλες WBF®: Προστατεύουν το δέρμα γύρω από τη στομία από την επαφή με τα υλικά που αποβάλλονται από τη στομία και την κόλλας που σχε

